

Einfach online
konfigurieren:
[https://configurator.
provita.de/tee-care](https://configurator.provita.de/tee-care)



provita[®]
medical



TEE CARE


GESCHÜTZT & SICHER

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit
für TEE-Ultraschallsonden

TEE CARE



Technische Details
unter provita.de

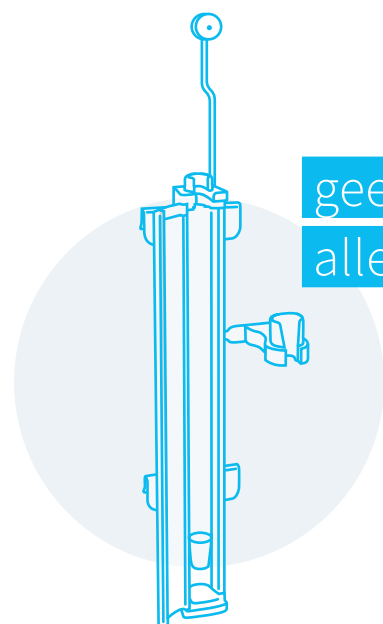

geeignet für
alle Hersteller

- **KEINE VERKRÜMMUNG** aufgrund der hängenden Lagerung
- **MECHANISCHER SCHUTZ** der TEE-Sonde:
Schutz vor Beschädigung und Pendelschutz
- **KEINE KONTAMINATION** aufgrund staubgeschützter Lagerung
- **KLARE KENNZEICHNUNG**
Sonde aufbereitet / kontaminiert
- **WISCHDESINFIZIERBAR**
Glatte Oberflächen und gute Zugänglichkeit zur Wischdesinfektion
- **SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT** der aufbereiteten TEE-Sonde
- **KONFIGURIERBAR**
geeignet für sämtliche Sondenhersteller

- **KABELUMLENKROLLE** für optimale & knickfreie Kabelführung
- Als **KOMPLETTSYSTEM** möglich, Anbringungsmöglichkeiten des Protektors an:
 - » Schrankeinbau
 - » Infusionsständer*
 - » Andockwagen
 - » Wandschienen
- **MDR-KONFORM**

* Bei mobilem Einsatz ist entsprechend auf Kippsicherheit sowie eine stabile Anbringung etc. zu achten.



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>

Kabelumlenkrolle für
optimale Kabelführung



Mechanischer
Schutz bei
Lagerung und
Transport



Klare
Kennzeichnung

Wischdes-
infizierbarer
Protektor




Hängende
Lagerung,
keine
Verkrümmung
der Sonde



Schutz des
empfindlichen
Distalendes

Sonde
kontaminiert

Sonde
aufbereitet

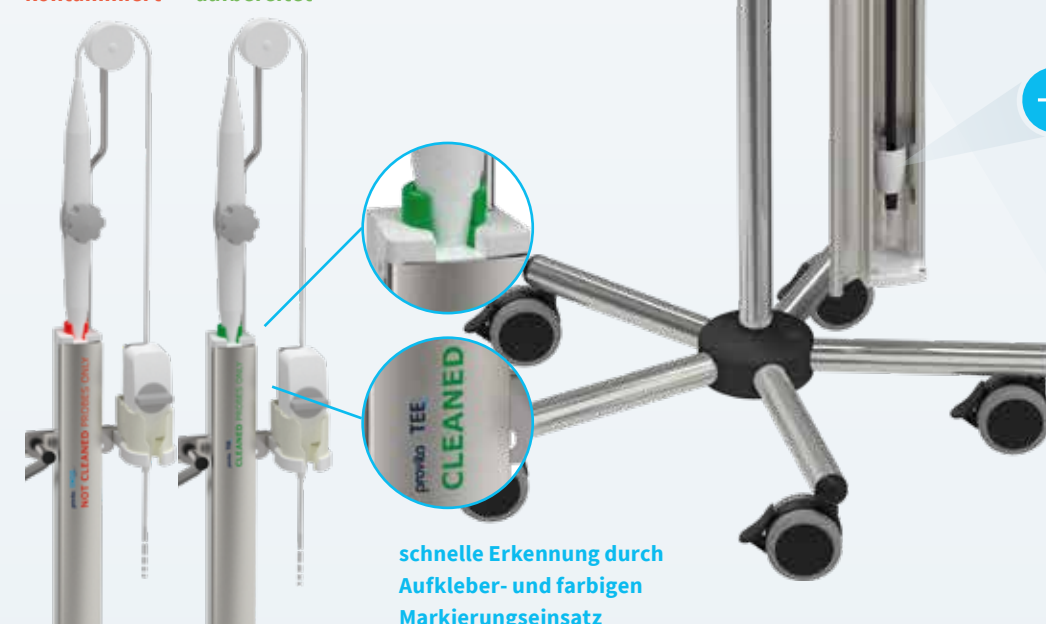


schnelle Erkennung durch
Aufkleber- und farbigen
Markierungseinsatz

DAS MOBILITÄTSKONZEPT

Der Protektor ermöglicht den flexiblen und sicheren innerklinischen Transport einer TEE-Sonde von der Aufbewahrung bis hin zur Untersuchung. Der Protektor bietet eine sofortige Verfügbarkeit der aufbereiteten Sonde am Notfallwagen oder Infusionsständer. Bei Notfällen kann so entsprechend schnell reagiert werden.

- 1** Aufbereitete Sonde – im Protektor gelagert und aufbewahrt im Schrank

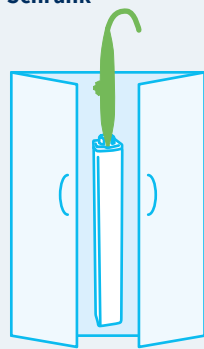

- 2** Anbringung des Protektors am Infusionsständer oder Notfallwagen




- 3** Untersuchung/Diagnostik = Sonde wird kontaminiert



4

- 5** Lagerung des aufbereiteten Protektors im Schrank oder wieder direkt am Infusionsständer/Notfallwagen etc.

Tauchdesinfizierbare Sonde

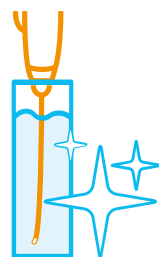

Aufbereitung der Sonde per Tauchdesinfektion und Aufbereitung des Protektors durch Wischdesinfektion*


1. Reinigung
2. Tauchdesinfektion
3. Dichtigkeitsprüfung
4. Erneute Tauchdesinfektion
5. Lagerung im Protektor

*notwendige Prozessschritte je nach Vorgaben und Nutzung

Wischdesinfizierbarer Protektor



Aufbereitung der Sonde und des Protektors mittels Wischdesinfektion

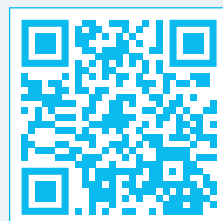

Zum Video auf provita.de/video/TEE/

Befestigungsmöglichkeiten/Varianten



PROTEKTOR MIT BEFESTIGUNG für Geräteschienen

Grüner Einsatz T-W71416

Roter Einsatz T-W71426



PROTEKTOR MIT BEFESTIGUNG für direkte Wandmontage (Serie „DIRECT“)

Grüner Einsatz T-W72416

Roter Einsatz T-W72426

PROTEKTOR ZUR MONTAGE AN HYGIENE-RÜCKWAND

Serie „DIRECT +“

Grüner Einsatz T-W73416

Roter Einsatz T-W73426



MARKIERUNGSEINSATZ

Kennzeichnung bei wischdesinfizierbarem Protektor

grün = Sonde aufbereitet
rot = Sonde kontaminiert




PENDELSCHUTZ (ENTHALTEN)

23 mm

Mobile Einheiten
Tauchdesinfektion



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>

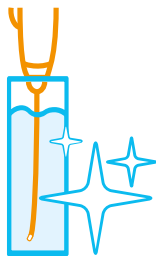

Enzymatische
Vorreinigung




Tauch-
desinfektion



Dichtigkeits-
prüfung



mobile Einheit T-T05070

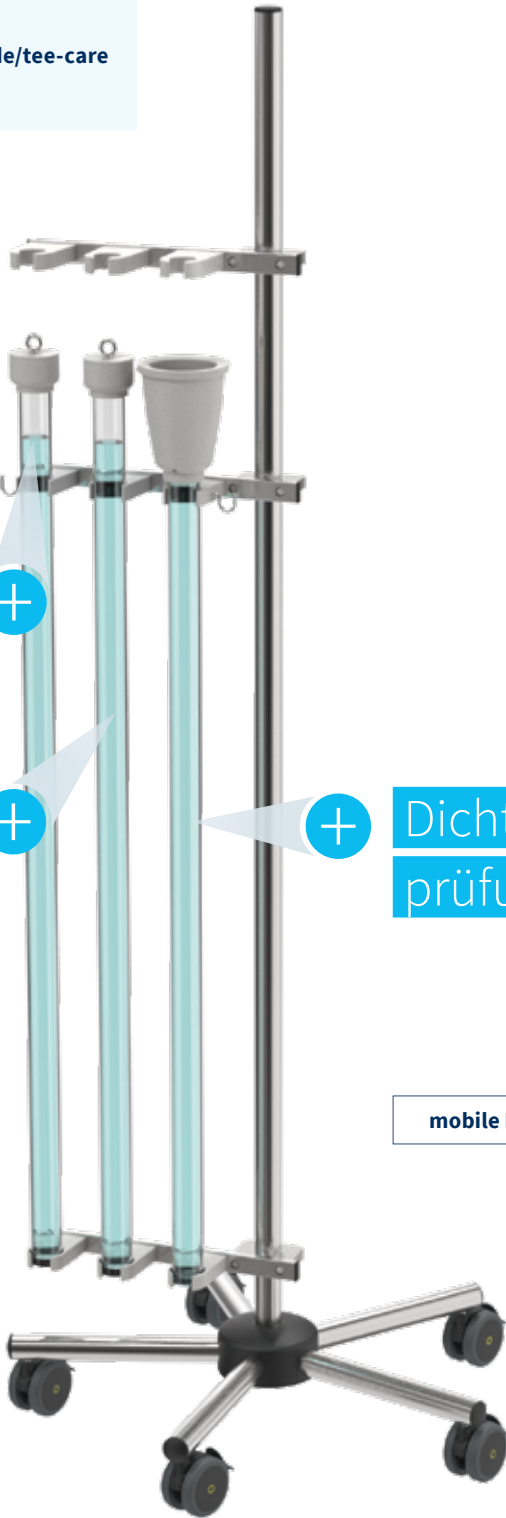

	T-W05000	T-T05030	T-W05040	T-T05050	T-T05060	T-T05070
Enzymatische Vorreinigung					✓	✓
Tauchdesinfektion		✓		✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung			✓	✓		✓
Transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobile Einheit
Wischdesinfektion



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>



Sondenhalterung Z-Z00310

Steckerhalter Z-Z00040

Normschiene Z-Z00100

mobile Einheit T-W05000



Abwurf/Sekretauffangschale Z-TW0003

Stationäre Einheiten



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>



	T-W55000	T-T55030	T-W55040	T-T55050	T-T55060	T-T55070
Aufbewahrung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tauchdesinfektion		✓		✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung			✓	✓		✓
Enzymatische Vorreinigung					✓	✓

ZUR MONTAGE AN
GERÄTENORMSCHIENEN

Protector für Gerätenormschiene

Grüner Einsatz	T-W71416
Roter Einsatz	T-W71426

Steckerhalter für Gerätenormschiene

siehe Seite 10

Steckerhalter für stationäre Einheiten

siehe Seite 12



SERIE „DIRECT“

Protector für direkte Wandmontage

Grüner Einsatz	T-W72416
Roter Einsatz	T-W72426

FÜR SCHRANKEINBAU

Schrankeinheit

für 1 Ultraschallsonde	T-W06401
für 2 Ultraschallsonden	T-W06402



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>

UMLENKROLLE FÜR
KABELSCHUTZ

Enzymatische
Vorreinigung



Tauch-
desinfektion



Wandeinheit T-T07476

Dichtigkeits-
prüfung



	T-W07401	T-T08436	T-T08466	T-M07432	T-T07432	T-T07456	T-T07466	T-T07476
Enzymatische Vorreinigung			✓				✓	✓
Tauchdesinfektion		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung				✓		✓		✓
Aufbewahrung	✓	✓	✓					



MIT BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT STECKERSCHUTZ



TEE Sonden- und Steckerhalter
T-W08000



TEE Basishalterung
T-W08010



TEE Basishalterung
T-W08020



Schraubhalter für Steckerschutz
E-B-S006

 STECKERSCHUTZSYSTEME

siehe Seite 15

 SONDENHALTER
für Rundrohr 33,7 mm



Z-Z00300



Z-Z00310



Z-Z00320



Z-Z00330

 STECKERHALTER
für Gerätenormschiene



T1 Z-Z00020



T2 Z-Z00030



T4 Z-Z00040



TU Z-Z00050



**TU mit optionalem GE-Steckerschutz
D-Typ** Z-Z00060



Sonderausführung auf Anfrage
Z-Z00070

 NORMSCHIENEN
für Rundrohr 33,7 mm



Z-Z00100



Z-Z00110



Z-Z00120



Z-Z00130

 PROTEKTOREN

siehe Seite 5



Mehr Optionen unter provita.de

 ABLAGE
für Wischdesinfektionstücher/
Tristel Wipes



Z-TW0005

 HANDSCHUHHALTER



Z-TW0002

 **DESINFEKTIONS-
MITTELSPENDER**



Z-TW0001

 **SCHIEBEGRIFF-
HANDGRIFF**



Z-TW0002

 HALTERUNGEN
für Prüfgeräte



Z-Z00210

 **UNIVERSELLE
HALTERUNG**
für Dichtprüfgerät



80 mm x 75 mm x 115 mm (L x B x H)
Z-Z00230

 **SPEZIAL-
REINIGUNGSBÜRSTE**



Z-TT0006

 **ABWURF/SEKRET-
AUFFANGSCHALE**



Z-TW0003

 ABLAUFHAHN



Z-TT0005

 STECKERSCHUTZSYSTEME



GE Z-Z00007



Philips Z-Z00008



Sonderausführung auf Anfrage
Z-Z00009

 STECKERHALTER
vormontiert an „DIRECT +“-Wandeinheiten



Z-Z00620



Z-Z00630



Z-Z00640



Z-Z00650



Z-Z00670

 HALTERUNG
für Dichtprüfgerät



für GE Bite Hole Indicator Z-Z00220

 **UNIVERSELLE
HALTERUNG**
für Dichtprüfgerät



Z-Z00240

 PROTEKTOREN
für stationäre Hygienerückwände „DIRECT +“



T-W73416



T-W73426

 Dichtprüfgeräte auf Anfrage

 Mehr Optionen unter provita.de

Für folgende Sondentypen sind Steckerhalter verfügbar:

- + Philips
- + GE
- + Siemens
- + Canon
- + Fujifilm Sonosite
- + Mindray
- + Aloka Hitachi
- + BK Medical
- + Esaote
- + Samsung
- + Toshiba








**Sollte Ihre Sonde nicht
aufgelistet sein, wenden
Sie sich gerne an uns –
wir entwickeln den
passenden Steckerhalter
für Sie.**



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>

ÜBERSICHT

Maße der verschiedenen Steckerhalter

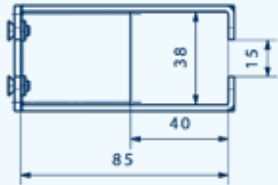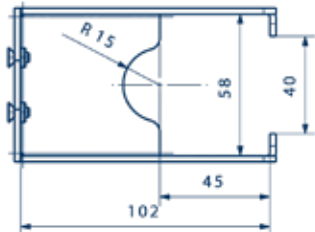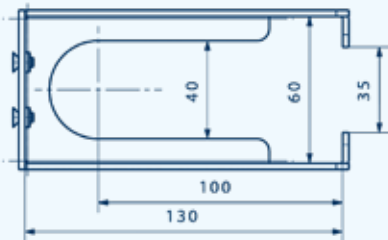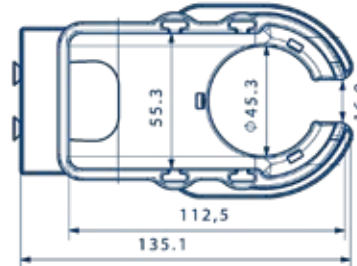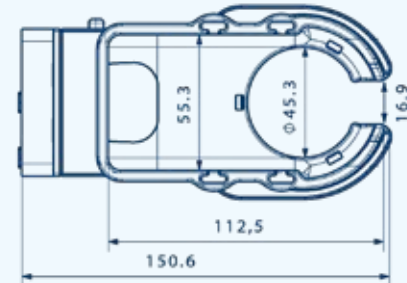	Benennung	Normschiene 25 mm × 10 mm	Protektor & Hygiene-Rückwand
	Steckerhalter T1	Z-Z00020	Z-Z00620
	Steckerhalter T2	Z-Z00030	Z-Z00630
	Steckerhalter T4	Z-Z00040	Z-Z00640
	Steckerhalter GE/TU (1)	Z-Z00050	Z-Z00650
	Steckerhalter GE/TU (2)	Z-Z00060	





Kennen Sie schon unsere anderen Kataloge?



Stand: 2023

provita medical gmbh & co. kg
Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany

Phone +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0
Fax +49 (0) 21 93 / 51 05 - 269

info@provita.de
www.provita.de

